

# INTEX<sup>®</sup> *Helicobacter pylori* Stuhltest

Schnelltest zum Nachweis von *Helicobacter pylori* im Stuhl

## Schnelle und zuverlässige Diagnose – sofortige Therapie!

*Helicobacter pylori* verursacht verschiedene Magenkrankheiten, wie zum Beispiel Dyspepsie, Geschwüre im Magen und Zwölffingerdarm oder Gastritis, und kann das Risiko der Bildung von Magen-Adenokarzinomen erhöhen. Durch frühzeitige Erkennung des Erregers ist es möglich, die genannten Krankheiten im Frühstadium zu diagnostizieren und deren Behandlung einzuleiten. Der INTEX<sup>®</sup> *Helicobacter pylori* Stuhltest ist ein nicht-invasiver Membrantest. Er ist einfach und innerhalb weniger Minuten durchführbar.



### Testeigenschaften

- Qualitativer Einstufenschnelltest
- Hochspezifisch auf *H.pylori*
- Einfache Handhabung
- Günstige Alternative zum Atemtest
- Zuverlässiges Ergebnis in 10 Minuten
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Haltbarkeit bis zu 2 Jahre



### Testdurchführung

- ① Benutzen Sie zur Gewinnung der Probe den Stuhlfänger.
- ② Röhrchen öffnen und Stuhlprobe mit Spiralstab an 3 Stellen entnehmen; in das Probensammelröhrchen geben; schütteln.
- ③ Verschlussspitze abbrechen und 3 Tropfen in die Probeöffnung der Testkassette geben.
- ④ Ergebnis nach 10 Minuten ablesen.

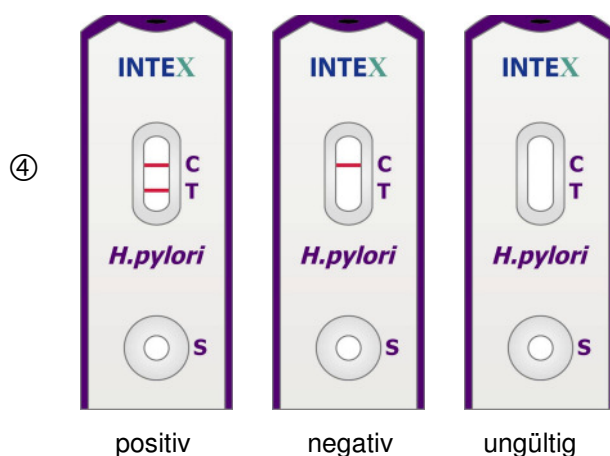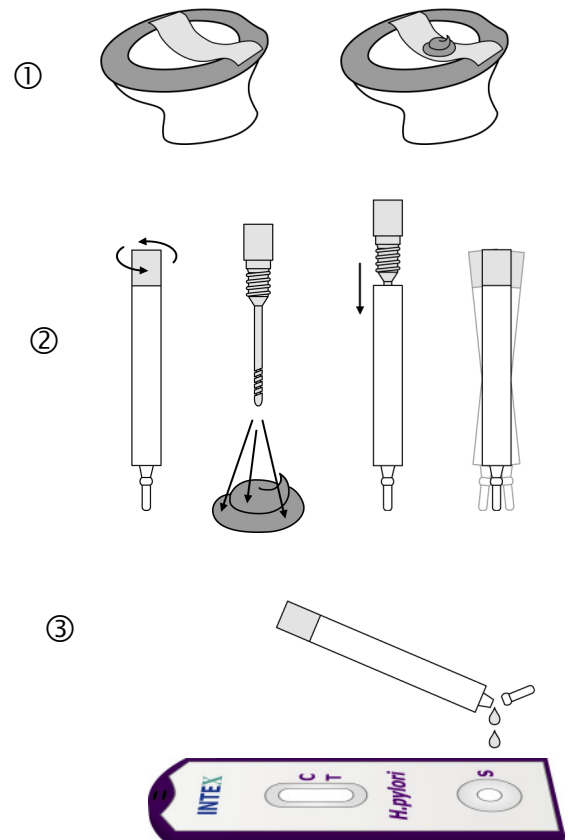

## Ihre Vorteile

- Geringe Probenmenge
- Schnelles Resultat
- Einfache Handhabung

## Leistungsmerkmale

- Diagnostische Sensitivität: 82.1 %
- Diagnostische Spezifität: 96.9 %
- Positiver Vorhersagewert: 91.4 %
- Negativer Vorhersagewert: 93.1 %
- Reproduzierbarkeit: 92.6 %

## Mitgelieferte Reagenzien und Materialien

- 10 Testkassetten
- 10 Probensammelröhrchen mit Puffer
- 10 Stuhlfänger
- 1 Gebrauchsanweisung

## Zusätzlich benötigte Materialien

- Saugfähiges Papier, um Verspritzen der Lösungen zu vermeiden
- Stoppuhr oder Timer

## Lagerung und Stabilität

Der INTEX<sup>®</sup> *Helicobacter pylori* Stuhltest (Kassetten und Puffer) kann gekühlt (2-8°C) oder bei Raumtemperatur (bis maximal 30°C) gelagert werden. Die Testkassetten müssen bis zur Anwendung im versiegelten Schutzbeutel verbleiben, da sie empfindlich gegen Luftfeuchtigkeit sind. Unter diesen Lagerbedingungen ist der Test bis zum aufgedruckten Verfallsdatum stabil.

<b>INTEX<sup>®</sup> <i>Helicobacter pylori</i> Stuhltest</b>	▼ Inhalt	REF Produktnummer
	10 Testkassetten	SKA81510



### INTEX<sup>®</sup> Pharmazeutica AG

Hofackerstrasse 77  
CH-4132 Muttenz  
Tel. (0041) 61 465 90 70  
Fax (0041) 61 465 90 71  
service.ch@intex-diagnostika.com

### INTEX<sup>®</sup> Diagnostika GmbH

Hauptstrasse 435  
DE-79576 Weil am Rhein  
Tel. (0049) 7621 940 90 80  
Fax (0049) 7621 940 90 84  
service@intex-diagnostika.com

### IDSAN<sup>®</sup> Kft.

Árpád u. 3/b. fdsz. 1  
HU-1195 Budapest  
Tel. (0036) 1 357 65 98  
Fax (0036) 1 357 65 99  
intex@t-online.hu

**INTEX<sup>®</sup>**  
Diagnostika

[www.intex-diagnostika.com](http://www.intex-diagnostika.com)