

INTEX[®]-GRAVI-HCG Test

Test de grossesse monophasé

Diagnostic rapide et fiable!

L'INTEX[®]-GRAVI-HCG Test est un test qualitatif immunologique rapide de haute sensibilité. C'est un test monophasé de détermination qualitative de la gonadotrophine chorionique (hCG) dans l'urine.

Vos Avantages

- **Très haute sensibilité: seuil de détection 20 mIU/mL.**
- **Excellente spécificité.**
- **Aucun réactif.**
- **Quantité d'urine nécessaire: 0.2 mL.**
- **Manipulation facile.**
- **Résultats clairs, indubitables et précis en 2 à 5 minutes.**
- **Stockage jusqu'à 18 mois à température ambiante.**
- **Dispositif de contrôle intégré.**




Procédure du test

Retirez la cassette du sachet et posez la sur une surface propre, sèche et horizontale.

Pipettez la quantité indiquée d'urine dans l'ouverture ronde de la cassette.

Le résultat peut se lire après 2 à 5 minutes.

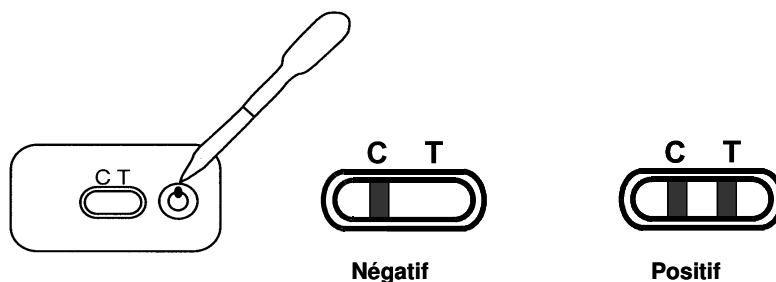

Caractéristiques du test

Sensibilité

La sensibilité analytique de l' INTEX[®]-GRAVI-HCG Test se situe à une concentration de 20 mIU/mL. Les tests de sensibilité ont été réalisés par des standards hCG qui sont calibrés conformément au premier préparation de référence international du WHO (1. IRP 75/537) qui est certifié 4. Standard hCG International (75/589).

Des résultats faux négatif par des très hautes concentrations d'hCG (effet Hook) n'ont pas pu observé aux concentrations d'hCG jusqu'au 600'000 mIU/mL.

Pour la détermination de la sensibilité des études ont été effectué: Des échantillons d'urine ont était pris par 5 femmes pas enceinte et ils ont était enrichi avec 0, 10, 20, 40 et 100 mIU/mL. 100 échantillons ont étaite examiné avec l'INTEX[®]-GRAVI-HCG Test. Vous trouvez les résultats dans le tableau au-dessous:

Concentration hCG (mIU/mL)	0	10	20	40	100
Nombres échantillons	20	20	20	20	20
Négatif	20	10	0	0	0
Positif	0	10	20	20	20

Spécificité

Les glycoprotéines suivantes ont été mélangés à des échantillons hCG positifs (100 mIUhCG/mL) et négatifs (0 mIUhCG/mL) et testés avec INTEX[®]-GRAVI-HCG Test: Aucune interférence n'a été observée.

Hormone lutéinisante:	300 mIU/mL
Hormone stimulante du follicule (FSH):	1000 mIU/mL
Thyrotrophine (TSH):	1000 µIU/mL

INTEX[®]-GRAVI-HCG	▼	REF
	2 cassettes de test	GH3302
	10 cassettes de test	GH3310
	30 cassettes de test	GH3330



INTEX[®]
Diagnostika

INTEX[®] Pharmazeutica AG

Hofackerstrasse 77
CH-4132 Muttenz
Tel. (0041) 61 465 90 70
Fax (0041) 61 465 90 71
service.ch@intex-diagnostika.com

INTEX[®] Diagnostika GmbH

Hauptstrasse 435
DE-79576 Weil am Rhein
Tel. (0049) 7621 940 90 80
Fax (0049) 7621 940 90 84
service@intex-diagnostika.com

IDSAN[®] Kft.

Árpád u. 3/b. fsz. 1
HU-1195 Budapest
Tel. (0036) 1 357 65 98
Fax (0036) 1 357 65 99
intex@t-online.hu

www.intex-diagnostika.com