

INTEX[®]-FOB Test

Schnelltest zum Nachweis von Human-Hämoglobin im Stuhl

Schnelle und zuverlässige Diagnose – sofortige Therapie!

Der INTEX[®]-FOB Test ist ein hochspezifischer Sandwich-Immunoassay, für den qualitativen Nachweis von menschlichem Hämoglobin in Stuhlproben.


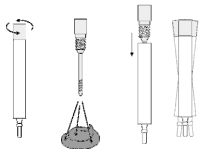
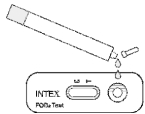

Okkultes nicht sichtbares Blut im Stuhl kann auf verschiedene Krankheitsbilder hinweisen, dazu gehören gastrointestinale Erkrankungen wie Magengeschwüre, Polypen, Colitis, Diverticulitis, Hämorrhoiden oder kolorektale Karzinome. Durch frühzeitige Erkennung des okkulten Blutes ist es möglich, die genannten Erkrankungen im Frühstadium zu diagnostizieren und deren Behandlung einzuleiten.


Testeigenschaften

- **Qualitativer Sandwich-Immunoassay**
- **Hochspezifisch auf Human-Hämoglobin**
- **Hohe Sensitivität**
- **Ein-Stufen-Schnelltest: einfache Handhabung**
- **Zuverlässiges Ergebnis nach 5 Minuten**
- **Keine Einschränkungen in der Ernährung**
- **Lagerung bei Raumtemperatur bis zu 2 Jahren**



Testdurchführung

- ① Benutzen Sie zur Gewinnung der Probe den Stuhlfänger. 
- ② Röhrchen öffnen und Stuhlprobe mit Spiralstab an 3 Stellen entnehmen; in das Probensammelröhrchen geben; schütteln. 
- ③ Verschluss-Spitze abbrechen und 2 Tropfen in die Probenöffnung der Testkassette geben. 
- ④ Ergebnis nach 5 Minuten ablesen. 

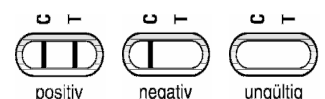

Ihre Vorteile

- Einfache Handhabung
- Genaues Ergebnis nach 5 Minuten
- Im Gegensatz zum Guajak-Test, keine Ernährungsumstellung

Sensitivität

Die analytische Sensitivität des INTEX[®]-FOB Test liegt bei einer Konzentration von ca. 2 µg Human-Hämoglobin pro g Stuhl was einer Konzentration von ca. 40 ng Human-Hämoglobin pro mL Extraktionspuffer entspricht.

Der INTEX[®]-FOB Test liefert bis zu einem Hämoglobinwert von 0.5 mg/mL im Extraktionspuffer zuverlässige Resultate.

Spezifität

Der INTEX[®]-FOB Test ist spezifisch für Human-Hämoglobin und zeigt keine Kreuzreaktivität mit dem Hämoglobin von Rind, Schwein, Kaninchen, Pferd und Schaf bei einer Konzentration von bis zu 0.5 mg Hämoglobin per mL Extraktionspuffer.

Der INTEX[®]-FOB Test zeigt keine Kreuzreaktivität mit Bilirubin, Vitamin C oder Meerrettich-Peroxidase.

INTEX[®]-FOB Test	▽	REF
	5 Testkassetten	FO1805
	20 Testkassetten	FO1820
	50 Testkassetten	FO1850



INTEX[®]
Diagnostika

INTEX[®] Pharmazeutica AG

Hofackerstrasse 77
CH-4132 Muttenz
Tel. (0041) 61 465 90 70
Fax (0041) 61 465 90 71
service.ch@intex-diagnostika.com

INTEX[®] Diagnostika GmbH

Hauptstrasse 435
DE-79576 Weil am Rhein
Tel. (0049) 7621 940 90 80
Fax (0049) 7621 940 90 84
service@intex-diagnostika.com

IDSAN[®] Kft.

Árpád u. 3/b. fsz. 1
HU-1195 Budapest
Tel. (0036) 1 357 65 98
Fax (0036) 1 357 65 99
intex@t-online.hu

www.intex-diagnostika.com