

INTEX[®]-FOB Test

Test rapide pour la détermination de l'hémoglobine humaine dans les selles

Diagnostic rapide et fiable – traitement immédiat!

Du sang occulte dans les selles peut attirer l'attention sur plusieurs indications comme les maladies gastro-intestinales p.ex.: Ulcère d'estomac, colites, diverticules, polypes, hémorroïdes ou carcinome colo-rectal.

Le dépistage rapide permet de diagnostiquer ces maladies mentionnées et d'entamer le traitement. Le test INTEX[®]-FOB Test est un immunoassay hautement spécifique qui remplace le «Gua-jak-Test» habituel en offrant notamment d'autres avantages (une plus haute sensibilité et spécificité, une interprétation simple et aucune restriction concernant l'alimentation).




Particularités

- **Test immunoassay qualitatif**
- **Haute spécificité pour l'hémoglobine humaine**
- **Haute sensibilité**
- **Test monophasé rapide – manipulation simple**
- **Résultat fiable après 5 minutes**
- **Pas de restrictions concernant l'alimentation**
- **Stockage à température ambiante jusqu' à 2 ans**



Réalisation du test

- ① Utilisez l'échantillon de selles pour faire le test.
- ② Prélever un échantillon de selles à 3 endroits différents, l'introduire dans le tube et agiter.
- ③ Briser la pointe de la fermeture du tube et pipeter 2 gouttes dans l'ouverture ronde de la cassette.
- ④ Lire le résultat après 5 minutes.

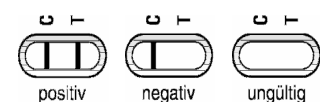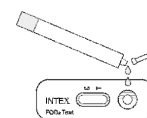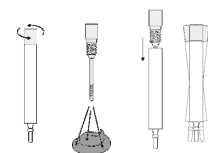

Avantages

- Manipulation simple
- Résultat indubitable en 5 minutes
- **Avantage concluant vis-à-vis «Guajak-Test»: Haute spécificité et sensibilité, pas de régime alimentaire.**

Sensibilité

La sensibilité du test INTEX[®]-FOB Test est de env. 2 µg d'hémoglobine humaine par gramme de selles, correspondant à 40 ng Hémoglobine humaine par mL de réactif d'extraction.

Des échantillons d'une valeur de 0.5 mg d'hémoglobine par mL de réactif d'extraction sont considérés comme positif.

Spécificité

INTEX[®]-FOB Test par sa haute spécificité pour l'hémoglobine humaine ne présente aucune interaction avec l'hémoglobine de veau, porc lapin, cheval, mouton pour une concentration de 0.5 mg d'hémoglobine par ml de réactif d'extraction.

De plus, aucune interaction avec bilirubine, vitamine C ou peroxydase de raifort a été observé.

INTEX [®] -FOB Test	▽	REF
	5 cassettes de test	FO1805
	20 cassettes de test	FO1820
	50 cassettes de test	FO1850



INTEX[®]
Diagnostika

INTEX[®] Pharmazeutica AG

Hofackerstrasse 77
CH-4132 Muttenz
Tel. (0041) 61 465 90 70
Fax (0041) 61 465 90 71
service.ch@intex-diagnostika.com

INTEX[®] Diagnostika GmbH

Hauptstrasse 435
DE-79576 Weil am Rhein
Tel. (0049) 7621 940 90 80
Fax (0049) 7621 940 90 84
service@intex-diagnostika.com

IDSAN[®] Kft.

Árpád u. 3/b. fdsz. 1
HU-1195 Budapest
Tel. (0036) 1 357 65 98
Fax (0036) 1 357 65 99
intex@t-online.hu

www.intex-diagnostika.com